

## HEMOCLIPS

### Features

Use polymers or insulating Titanium materials

### Indication

They are designed to block blood vessels (arteries and veins) during open surgery or laparoscopy, which aims at stopping the bleeding

### Specification

No interference with MRI, CT, X-RAY  
No accessories  
use it with applier  
Sterile: EO Gas

### Instruction

After removing the product from the packaging, we select a suitable applier. We slowly remove the clips from the base so that the pressure is not inserted in the applier's handle to prevent any damage to the applier tab. after removal of the clips, we fixed it on the desired vessel and using the applier

### Warning

Keep dry  
Use only once  
After using several clips, the rest of the clips are discarded  
Don't use it when the package has been opened or damaged

Code No.	Size	Measurement of vessels	Color	Material
15301	S	2mm-6mm	Blue	Titanium
15302	ML	3mm-10mm	Green	Polymer
15303	L	5mm-13mm	Purple	Polymer
15304	XL	7mm-16mm	Gold (brown)	Polymer



## کلیپس عروقی

### خصوصیات

تولید از جنس پلیمر یا تیتانیوم نارسانا

### موارد استفاده

کلیپس‌های کاشتنی برای بستن بیرونی عروق خونی (وریدها و شریان‌ها) در طول جراحی باز یا لاپاراسکوپی جهت توقف خونریزی

### ویژگی‌ها

- عدم تداخل با MRI ، CT ، X-RAY  
- فاقد لوازم جانبی است  
- برداشتن ابزار با کمک اپلایر  
- استریل به وسیله اتیلن اکساید

### روش استفاده

پس از خارج کردن محصول از بسته بندی، اپلایر مناسب را انتخاب نموده و توسط آن به آرامی کلیپس را از پایه برمی داریم به طوری که فشاری به دسته‌های اپلایر وارد نشده تا از آسیب به زبانه اپلایر جلوگیری شده و کلیپس نیفتد. پس از برداشتن کلیپس آن را روی رگ مورد نظر ثابت کرده و با استفاده از اپلایر آن را قفل می‌کنیم.

### هشدار

- درجای خشک نگهداری شود.  
- فقط یکبار مصرف گردد.  
- پس از استفاده، تعداد کلیپس های باقی مانده، دور ریخته شوند.  
- زمانیکه بسته بندی خراب و یا مخدوش است استفاده نگردد.



شرکت آسیا جراح پیشرو  
ASIA JARAH PISHRO CO. LTD

پیشرو در تولید محصولات مصرفی اتاق عمل و جراحی  
The leading manufacturer of operating room and surgical consumables

## LAPAROSCOPY

## Suction/Irrigation Sets

### Description

The single-use instrument is convenient, leak-free, and without assembling needs.

Suction button (white), allows simple, safe tissue/clot/secretions flushing.

Irrigation button (blue), allows saline to pass into the surgical site.

Distal tip shaft holes prevent tissue damage due to inadvertent aspiration

Clear ergonomic handpiece for unobstructed visualization

Ergonomic hand-piece ensures surgeon comfort and control

Clear coded trumpet valves and tubing ensure function

identification dual spikes options for Increased flexibility

### Warning

Keep dry

Use only once

Don't use it when the package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Code No.	Product description	Packaging
3361	Suction irrigation set 3mm/28mm	14 Packs/Box
3362	Suction irrigation set 5mm/33mm	14 Packs/Box
3363	Suction irrigation set 5mm/45mm	14 Packs/Box

## ست ساکشن اریگیشن

### توضیحات

وسیله‌ای یکبارمصرف مقاوم در برابر نشت و بدون احتیاج به مونتاژ کردن

دکمه مکند (سفید)، تخلیه ایمن بافت، لخته یا ترشحات را ممکن می‌سازد

دکمه شست و شو (آبی)، امکان عبور سرم مایع به داخل موضع را امکان پذیر می‌سازد.

سوراخ های موجود در لوله از بروز صدمه به بافت در برابر استفاده نادرست جلوگیری می‌کند.

دسته ارگونومیک شفاف برای دید بهتر

طراحی ارگونومی امکان استفاده راحت و بهتر را به جراح می‌دهد

استفاده از لوله و قطعات شفاف، کارکرد صحیح وسیله را نشان می‌دهد

قابلیت استفاده دو اسپایک جهت افزایش جریان مایع


### هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یکبار مصرف گردد

زمانیکه بسته‌بندی خراب یا مخدوش است استفاده نشود.

استریل با اتیلن اکساید

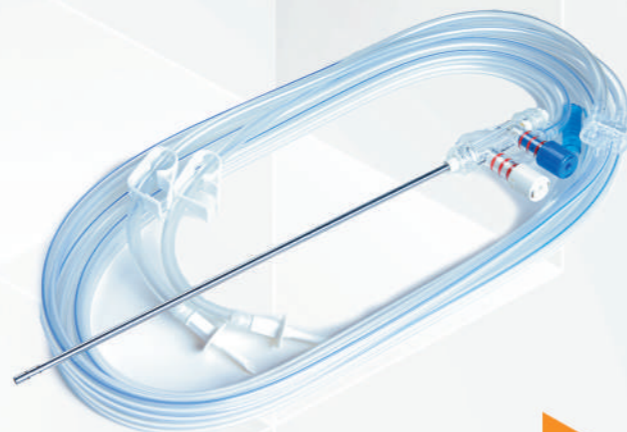

## Retrieval bag (Endobag)

### Description

TPU or nylon pouch assure no leakage

Reopening bag design makes easy and safe specimen capture

### Instructions

AJP Endobags are used in all types of laparoscopic surgery for removing excised tissue or specimen through a small incision and laparoscopic trocars

### Warning

Keep dry

Use only once

Don't use when package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Model	Code No	Bag Volume (cc)	Packaging
Small	9152	150	40 Packs/Box
Medium	9153	450	40 Packs/Box
Large	9154	700	40 Packs/Box
Automatic Small	9145	150	40 Packs/Box
Automatic Medium	9146	450	40 Packs/Box
Automatic Large	9147	700	40 Packs/Box



## کیسه تخلیه نمونه آندوسکوپی

### توضیحات

کیسه از جنس پلی اورتان یا نایلون جهت اطمینان از عدم نشتی

نوع باز و بسته شدن مجدد کیسه، نمونه‌برداری را آسان و مطمئن می‌سازد

### روش استفاده

آندوبگ‌های تولیدی AJP برای خارج کردن بافت‌های جدا شده و نمونه‌ها در انواع جراحی‌های لاپاراسکوپی از برش‌های کوچک جراحی و تروکارهای لاپاراسکوپی قابل استفاده می‌باشند

### هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یکبار مصرف گردد

زمانیکه بسته‌بندی خراب یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده بوسیله اتیلن اکساید

## Incision retraction and protection

### Description

AJP Retractors are used in all types of surgery for opening incisional tissues for better surgeon vision protecting incisions from skin contaminations

### Warning

Keep dry

Use only once

Don't use it when the package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Model	Code No.	Top ring diameter	Bottom ring diameter	Nylon diameter	Retractor height	Packaging
Small	9156	80 cm	80 cm	80 cm	40-150	20 Packs/Box
Medium	9157	120 cm	120 cm	120 cm	40-150	20 Packs/Box
Large	9158	200 cm	200 cm	200 cm	40-150	20 Packs/Box



## اکارتور موضع جراحی

### توضیحات

اکارتورها برای ایجاد دید بهتر جراح از محل جراحی و همچنین محافظت موضع جراحی از آلودگی‌های پوست، مورد استفاده قرار می‌گیرند

### هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یکبار مصرف گردد

زمانیکه بسته‌بندی خراب و یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده بوسیله اتیلن اکساید

## Camera Cover (Laparoscopic Cover)

### Description

To cover and maintain sterility, all types of endoscopic cameras, including: laparoscopic, arthroscopic, cystoscopic, etc., which cover the camera up to the lens junction and are fixed on the lens

Its length is 250 cm and in addition it can be used for all kinds of cables, tubes and probes in surgery.

### Warning

Keep dry

Use only once

Don't use when package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Code No.	Product	Dimension w×l	Packaging
1170	Endoscope cover	15×250cm	100 Packs/Box
1171	Clips Endoscope camera cover	15×250cm	100 Packs/Box
1174	Echo probe cover	2×80cm	100 Packs/Box
1175	Probe cover	10×80cm	100 Packs/Box

## کاور دوربین (لاپاراسکوپی یا آندوسکوپی)

### توضیحات

جهت پوشش و حفظ استریلیته انواع دوربین‌های آندوسکوپی اعم از: لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی، سیستوسکوپی و ... که دوربین را تا محل اتصال لنز می‌پوشاند و روی لنز ثابت می‌شود طول آن ۲۵۰ سانتی متر می‌باشد و علاوه بر آن برای انواع کابل، شلنگ و پروب‌ها در جراحی قابل استفاده می‌باشد.

### هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یکبار مصرف گردد

زمانیکه بسته‌بندی خراب یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده بوسیله اتیلن اکساید

